

		PRODUCT NAME ENDWARTS FREEZE			
		PRODUCT TYPE LEAFLET	USE SALE	LANGUAGE SK	COUNTRY SK
PRODUCT CODE 15795	FOLD 45x135 mm	PACK SIZE 270x545 mm		BARCODE - DATAMATRIX	MIN. FONT SIZE 8 PT
COLORS: 2	BLACK	CYAN			
DATE OF PREPARATION: 27-06-2022					

Cod. LG00893/14

0

1

2

3

Verifica Qui
le misure di
stampa

Check Here
the measures
of print

3 cm

3 cm

0

1

2

3

Návod na použitie
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod na použitie si uschovajte, možno bude potrebné, aby ste si ho znova prečítali.

EndWarts

FREEZE

ÚČINNĚ ODSTRAŇUJE
BRADAVICE

1. ÚVOD

EndWarts FREEZE je prostriedok na domáce ošetrenie, ktorý rýchlo a účinne odstraňuje bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. Je to prvý prostriedok na domáce ošetrenie, ktorý obsahuje veľmi studený oxid dusný. Vďaka technológii Ultra Freeze Technology™ zmrazí bradavicu na -80 °C a prenikne až do jej najhlbších vrstiev.

EndWarts FREEZE má veľmi nízku teplotu (-80 °C), ktorá sa udrží aj počas aplikácie.

EndWarts FREEZE je účinná zdravotnícka pomôcka, ktorej použitie je rýchle a jednoduché. Ošetrenie je vhodné pre dospelých a deti staršie ako 4 roky.

2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PRED POUŽITÍM A PO POUŽITÍ

Nepoužívajte EndWarts FREEZE

- u detí mladších ako 4 roky
- na tvári, slabinách, genitáliách, pokožke hlavy a slizniciach
- na zdravú pokožku (bez bradavíc)
- na bradavice v oblasti citlivej pokožky a buďte zvlášť opatrní pri ošetrovaní oblastí s tenkou kožou (napr. okolo kĺbov)
- ak bradavica a/alebo okolitá koža krváca alebo je otvorená, podráždená, svrbivá, infikovaná alebo začervenalá
- ak si nie ste istý, či ide o bežnú bradavicu, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom
- na materské znamienka, kurie oká, pluzgieri, iné kožné defekty alebo čokolvek, čo pripomína rakovinu kože (melanóm)
- na tekutinou naplnené puchieriky na koži (tzv. Molluscum contagiosum) alebo iné puchieriky a pluzgieri
- ak ste diabetik alebo ak máte problémy s krvným obehom alebo zrúžaním krvi
- na bradavice v zhľuku, alebo ktoré sa nachádzajú bližšie ako 3 cm: ošetríte jednu bradavicu a počkajte 14 dní, kým ošetríte ďalšiu bradavicu
- ak ste tehotná alebo dojčíte, overte si u svojho lekára, či môžete používať túto zdravotnícku pomôcku

Bezpečnostné opatrenia

- Nevdychujte. Len na vonkajšie použitie. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Na tenkú pokožku (ruky, prsty, palce na nohách, horná/bočná časť chodidiel a ramená) neaplikujte dlhšie ako 15 sekúnd, na hrubú, mozoľovitú pokožku nie dlhšie ako 40 sekúnd. Nadmerné alebo nesprávne používanie môže spôsobiť bolesť a poškodenie kože alebo nervov.
- Ošetrovanie bradavíc deťom EndWarts FREEZE majú vždy aplikovať dospelé osoby.
- Oxid dusný je netoxický, nehorľavý plyn, ktorý ale v prípade požiaru podporuje horenie. Udržiavajte mimo horúčavy, iskier, otvoreného ohňa a horúcich povrchov. Nefajčite ani nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.
- Tlaková nádoba. Pri zahriatí môže vybuchnúť. Neprepichujte ani nespálujte obal, ani po použití – pomôcka je pod vysokým tlakom a nedá sa otvoriť.

Pre lepšiu účinnosť na bradavice na chodidlách

Tvrdá koža na povrchu bradavice sťažuje ošetrenie. Pre dosiahnutie lepšieho výsledku v prípade bradavíc na chodidlách:



- Postihnuté miesto namočte do teplej vody, kým koža nezmäkne.
- Šetrne odstráňte prekrývajúcu kožu na vrstenej bradavici na chodidle, napr. pilníkom na chodidlá.
- Uistite sa, že bradavica a okolitá koža sú pred ošetrením úplne suché.

- Samotnú bradavicu nepilníkujte, môže sa tak stať citlivou a znova zatvrdnúť.

Po použití EndWarts FREEZE

Po použití EndWarts Freeze budete mať pocit mravčenia a koža na ošetrovanom mieste môže bolieť alebo byť podráždená. Tieto účinky by mali vymiznúť po niekoľkých hodinách. Postihnuté miesto ihneď po ošetrení zbelie. Po chvíli sa koža vráti k normálnemu sfarbeniu a bradavica sčervenalá.

Po niekoľkých minútach až dňoch po ošetrení sa môže vytvoriť pluzgier, príležitostne naplnený krvou. Je to prirodzený dôsledok zmrazovania a zvyčajne znamená, že ošetrenie bolo úspešné. Nepokúšajte sa pluzgier prasknúť. Ak je to potrebné, prekryte ho sterilnou gázou alebo ho dôkladne vydezinfikujte, pokiaľ praskol.

Ošetrovaná bradavica pomaly zmizne po 10 – 14 dňoch. Môže však trvať dlhšie, než sa koža úplne zregeneruje.

Ak sa bradavica nachádza na chodidle, môže spôsobovať bolesť pri chôdzi. Pre zmiernenie bolesti prelepte miesto náplastou na kurie oká.

- Do postihnutého miesta nezasahujte ani sa nepokúšajte bradavicu odtrhnúť!
- Udržujte ošetrované miesto čisté a podľa potreby dezinfikujte. **To je dôležité, aby sa zabránilo infekcii ošetrenej pokožky.**
- Ihneď po ošetrení sa môžete kúpať aj sprchovať.

Potrebujem zopakovať ošetrenie?

EndWarts FREEZE je veľmi účinný – rýchlo prenikne až k jadru bradavice a rozruší ho nízkou teplotou. Obvykle postačuje jedno ošetrenie. Staršie a veľké bradavice, najmä na chodidlách, môžu však vyžadovať opakované ošetrenia.

Bradavica pomaly zmizne po 10 – 14 dňoch. Ak bradavica, alebo jej časť nezmizne do 14 dní, zopakujte ošetrenie a kroky 1, 2 a 3. (Pozri časť 6 Ako používať EndWarts FREEZE).

Ak bradavica nezmizne ani po 3 ošetreniach, poraďte sa so svojím lekárom.

Poradte sa so svojím lekárom:

- ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa objavia nečakané vedľajšie účinky
- ak sa bradavica nehojí
- ak bradavica nemizne ani po 3 ošetreniach.

3. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Možné vedľajšie účinky zahrňajú


- Pluzgieri (možno naplnené krvou) okolo ošetrovaného miesta – čo sa líši od prípadu k prípadu (pozri časť 2 Po použití EndWarts FREEZE).
- Koža stratí farbu – tzv. depigmentácia.
- Drobné popáleniny a jazva.
- Riziko poškodenia kože alebo nervu (v prípade predávkovania).
- Prechodný pocit podráždenia (mravčenie, bodanie).

4. AKO UCHOVÁVAŤ ENDWARTS FREEZE

Pred prvým použitím

- Uchovávajte na suchom a chladnom mieste (5 – 25°C). Chráňte pred slnkom.
- Neuchovávajte v mrazničke.
- Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Neuchovávajte v aute, karavane alebo na inom mieste, kde by mohlo dôjsť k prehriatiu. Zvýšená teplota pomôcku poškodí a trvale zničí.

Po každom použití

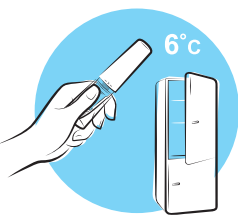

- Uzatvorte krytom a uchovávajte v chladničke – predĺžite tým dobu použiteľnosti EndWarts FREEZE a zvýšite počet použiteľných dávok.
- Neuchovávajte v mrazničke.
- Aktivovanú pomôcku nevystavujte teplotám nad 35 °C, nakoľko to aktivuje bezpečnostnú funkciu, ktorá pomôcku trvale zničí.

- Po použití počkajte 2 minúty, zahodte jednorazový hrot a nasadte nový hrot. EndWarts FREEZE je teraz pripravený na ďalšie použitie.
- Na čistenie plastových častí, použite vlhkú handričku.

5. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Balenie a doba použiteľnosti

- Jedno balenie obsahuje jednu pomôcku EndWarts FREEZE (7,5 g tekutý oxid dusný), sadu 7 jednorazových hrotov a návod na použitie.
- Po zatlačení na 2 sekundy pred aplikáciou je zariadenie postačujúce na 7 dávok.
- Doba použiteľnosti po aktivácii: v chladničke 2 mesiace.
- Nepoužívajte pomôcku po dátume spotreby, ktorý je uvedený na škatuľke.
- Prázdny obal zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu komunálneho odpadu.

Čo robiť, ak je pomôcka prázdna alebo poškodená:

- Ak po úspešnej aktivácii a príprave pomôcky nevidíte námrazu alebo ľadovú paru (pozri časť 6 Ako používať EndWarts FREEZE), došiel plyn – použite nový EndWarts FREEZE.
- Ak po aktivácii pomôcky počujete kontinuálne syčanie a všetok plyn unikol, pomôcka je pokazená. Nepokúšajte sa ju otvoriť ani sami opraviť, aj keď si myslíte, že je prázdna – nepoužitú pomôcku vráťte do lekárne.

6. AKO POUŽÍVAŤ ENDWARTS FREEZE

! PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ KROKY

AKTIVÁCIA

Len pred prvým použitím

EndWarts FREEZE je potrebné raz aktivovať. Zatiaľ kryt neodstraňujte.

Bielu časť pomôcky otočte aspoň o jednu otáčku v smere šípky, kým nezaznamenáte hlasné kliknutie. Je k tomu potrebná určitá sila.

Po úspešnej aktivácii pomôcky už viac neopakujte tento krok.

1 PRÍPRAVA

Pred každým použitím sa EndWarts FREEZE musí naplniť ľadovým plynom.

Postavte ENDWARTS FREEZE koľmo na stôl, priesvitným krytom dole. Pomôcku pevne uchopte a pridržte. Druhou rukou stlačte smerom dole bielu časť presne na 2 sekundy.

Ak stlačíte dlhšie, vyplytváte tým prostriedok. Ak stlačíte kratšie, znížite tým zmrazovací účinok.

2 KONTROLA

Odstráňte priesvitný kryt a pomôcku ihneď použite!

Skontrolujte, či vidíte ľadovú paru. Ak nie, zopakujte krok 1.

3 OŠETRENIE

Pevne pritlačte hrot na bradavicu.

Pre najlepší účinok je rozhodujúci čas!

- 15 sekúnd na tenkej pokožke (ruky, prsty, palce na nohách, horná/bočná časť chodidiel a ramená)
- 40 sekúnd na hrubú, mozoľovitú pokožku (chodidlá nôh)

Vráťte kryt. HOTOVO!

Po použití uchovávajte v chladničke.

Bradavica pomaly zmizne po 10 až 14 dňoch. Ak bradavica alebo jej časť nezmizne do 14 dní, zopakujte kroky 1, 2 a 3.